

INNOWALK

Möjliggör aktivitet varje dag

I- OCH UR
GUIDE





Pre-check

Pre-check är en kontroll som genomförs för att upptäcka slitage på viktiga delar. De viktigaste delarna blir kollade dagligen före användning medan andra delar blir kontrollerade för slitage en gång i månaden.



För fler tips på hur du utför pre-check, skanna QR-koden och gå igenom de instruktionerna som visas.



Förberedelse inför förflyttning

- Slå på strömmen
- Placera Innowalken i sittande ställning
- Sväng ut sätet och fäll ner underbensbyglarna (A)
- Öppna upp alla remmar, bröst- och höftstöd, lossa på gåremmen.


Om svängbart säte används för självständigare förflyttning

- Positionera fotplattan på ingångssidan till lägsta position
- Vrid det svängbara sätet till önskad ingångssida (B)
- Justera sätet till önskad höjd med hjälp av fjärrkontrollen för enklare förflyttning med exempelvis rullstol (storlek M och L)

Om lyft används vid förflyttning

Bruk tilt-funksjonen for å få plass under Innowalk til "beina" på personløfteren (ikke nødvendig dersom takheis brukes)

A

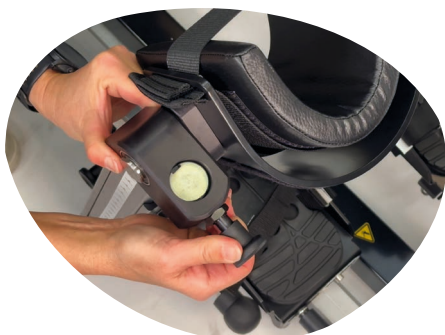

Dra upp handtaget (1), lyft upp (2) och sväng ut underbensbygeln



Dra upp handtaget (1) och sänk underbensbygeln

B



Dra ner handtaget (1) och vrid sätet

Förflyttning till Innowalk

- Förflytta användaren till sätet och ge stöd tills hen sitter stabilt med hjälp av bålstöden
- Säkra bålstöden och fäst höftbältet löst
- Om svängbart säte används, ställ in sitthöjden och vrid sätet till utgångsposition (C)
- Fäst remmarna över fötterna (D)
- Fäst underbensbyglarna (E)
- Fäst gåremmen (F) och ställ in den på rätt längd
- Res upp användaren från sittande till stående position
- Fäst höftbältet i stående position (G)



Förflyttning ur Innowalk

- Lossa på höftbältet
- Sänkt till sittande position
- Lossa på remmarna över fötterna
- Lossa på gåremmen och ta bort underbensbyglarna

Om svängbart säte används för mer självständig förflyttning

- Vrid sätet till önskad sida
- Sänk sätet till önskad höjd för förflyttning
- Lossa på bålstagen
- Förflytta personen ut ur hjälpmedlet

Om lyft används vid förflyttning

- Fäst lyftremmarna/selen till lyften
- Lossa på bålstagen
- Förflytta personen ut ur hjälpmedlet

INNOWALK

**Ta kontakt med din Made for Movement-
representant om du behöver hjälp vid
användning av Innowalk.**

 + 46 (0)33 21 08 80

 madeformovement.com/sv

Med förbehåll för tryckfel / MFM-SE-0324 / © 2024 Made for Movement AS Alla rättigheter förbehållna.