



BeMe Moderate



BeMe Basic



BeMe Advanced

BeMe

Et unikt modulerbart sittesystem
for barn, unge og voksne

Bli kjent med BeMe

BeMe - et modulbasert sittesystem som følger deg gjennom alle livets faser, fra barn til voksen.

Alle har unike behov, og ingen enkelt løsning kan dekke dem alle. Derfor er BeMe utviklet som et modulbasert sittesystem for personer med milde til omfattende støttebehov. Systemet er designet for å vokse og tilpasses den enkelte - gjennom alle livets faser

BeMe er bygget på Leckey's kjerneprinsipper:

- 1 Klinisk forankring**
med bekkenets posisjon som grunnlaget for en god og stabil sittestilling.
 - 2 Høye kvalitetsstandarder**
som sikre lang levetid og driftssikkerhet.
 - 3 Fokus på detaljene**
fordi hver eneste detalj har betydning.
- ✓ Tre seter
 - ✓ Fire størrelser
 - ✓ Utvalg av innendørs-, elektriske- og manuelle understell
 - ✓ Et bredt utvalg av utskiftbart tilbehør



**Introduksjon
av BeMe**



Skann QR koden
for å lære mer

Perfekt tilpasning i alle faser

En serie av sittesystemer

BeMe-serien består av tre ulike sittesystemer for personer med et bredt spekter av behov for støtte i sittende.



BeMe Basic (Active)

Utviklet for personer med milde til moderate støttebehov og som har behov for et sittesystem i forbindelse med måltider, læring og lek. Designet slik at du ser personen og ikke stolen. Bruker av BeMe Basic kan ofte forflytte seg selvstendig.

BeMe Moderate

Utviklet for personer med redusert kontroll av overkroppen og som har behov for økt bekkenstabilitet samt støtte for overkropp og hode. Med integrert formstøpt pute og rygg med justerbar korsryggstøtte er både presisjon og komfort en naturlig del av løsningen.

BeMe Advanced

Utviklet for personer med asymmetrier, som ikke korrigererbar skoliose eller windesweptstilling. Tidligere krevde slike behov spesialtilpassede løsninger. BeMe Advanced bygger bro mellom modulbaserte og formstøpte sittesystemer.

Designet for utvikling

Å holde tritt med barnets utvikling og endrede behov er en av de største utfordringene ved sittesystemer. Derfor er alle løsningene i BeMe-serien utviklet med tanke på vekst.

Kjernen i BeMe er den innovative patenterte trekkspill-skumputen kombinert med 4-veis elastisk trekk, som gir fleksibilitet uten av gå på bekostning av støtte.

Hvert sete har 12 cm innbygd vekstkapasitet og kan vokse i takt med brukeren. Det sikre kontinuerlig støtte uten behov for ekstra innsatser eller tilleggskomponenter - og uten at det oppstår synlige glipper i støtten.

Tilpasningsdyktig

Behov for en skreddersydd løsning eller litt ekstra støtte? Med BeMe sittesystemers fleksible oppbygging kan alle modellene tilpasses det enkelte personens unike behov.

BeMe er blant de få stolen på markedet som gjør det mulig å oppgradere sete eller rygg til en annen størrelse eller konfigurasjon. I tillegg kan tilbehør byttes og brukes på tvers av alle modeller og størrelser.

BeMe Basic

Designet for aktivitet

Møt BeMe Basic – en innovativ sitteløsning, utviklet for mer aktivitet.

Dette setet er ideelt for barn som kan forflytte seg selvstendig, men som fortsatt trenger tilpasset postural støtte i hverdagsaktiviteter.



Egnet for personer på GMFCS nivå 3, som er i stand til å gjennomføre stående forflytning

Særlig godt egnet for yngre, aktive brukere med en ryggstøtte som fortsatt er i utvikling.

Gir trygg og hensiktsmessig støtte i hverdagsaktiviteter som skole, lek og tid sammen med familie.



Møt Katie-Louise

Barn som Katie-Louise har behov for lav til moderat støtte for å delta i aktiviteter som måltider og lek. De veksler ofte mellom ståstativ, rullestol og arbeidsstol i løpet av dagen, og det er derfor viktig at det er enkelt å gjennomføre stående forflytninger inn og ut av setet.

Vokser med brukeren

Som alle løsningene i BeMe-serien har BeMe Basic integrert vekst som en del av designet. Setet er utstyrt med den patenterte trekkspill-skumputen og 4-veis elastisk trekk, slik at det kan vokse i takt med brukeren.

For å sikre optimal bekkenposisjonering vokser ryggen på BeMe Basic fra bekkenet og opp mot skuldrene, og gir kontinuerlig støtte gjennom hele stolens levetid. BeMe Basic gir også 360° bekkenstøtte, med funksjoner som inkluderer: med funksjoner som inkluderer:

- 1 Setepute med oppbygget front som bidrar til å holde lårene i nøytral og stabil posisjon
- 2 Polstret 4-punkts bekkenbelte med justerbar beltevinkel
- 3 Justerbare hoftestøtter som sentrerer bekkenet og gir sidestøtte
- 4 Justerbar, formet ryggstøtte som fremmer midtlinjeorientering og symmetrisk sittestilling



Skann QR koden for å lære mer



Se videoen om BeMe Basic sine funksjoner og fordeler, inkludert det innovative trekkspill-skummet og det fireveis stretchstoffet.



Utviklet for å støtte stående forflytning

For personer som kan gjennomføre stående forflytninger, gir det mange fordeler å opprettholde og trene på denne funksjonen. Det bidrar blant annet til styrking av muskulatur og ledd, vektbæring og god hjerte- og karhelse, samt utvikling av selvtillit, psykososial trivsel og selvstendighet.

For å legge til rette for stående forflytning inkluderer BeMe Basic:

- 5 Låsbar, oppfellbar fotplate.
- 6 Armlener som kan justeres i høyde, dybde og vinkel.
- 7 Ekstra lavt understell med flere høydeinnstillinger og 15° fremover tilt
- 8 Kompatibel med hele utvalget av BeMe hurtigkoblede tilbehør, som bord og abduksjonskloss

Tilpass med tilbehør for å møte alle behov

Å tilpasse setet til hvert enkelt barns behov vil bidra til å maksimere deres evne og funksjon, samtidig som det reduserer tretthet og øker komforten.

Vanlige tillegg til BeMe Basic inkluderer svingbare sidestøtter for å støtte midtlinjeposisjonering, vår justerbare hode støtte for spising eller transport, eller en oppgradering til den voksbare, konturerte puten for å forbedre bekkenstabiliteten.

Som med alle seter i BeMe-familien er alle deler og tilbehør fullt ut utskiftbare for tilpasset størrelse, form eller funksjon.



Skann QR koden for å lære mer



BeMe Basic er designet for å holde barn aktive og selvstendige lengre. Se hvordan Katie-Louise demonstrerer sin stående forflytning inn i sin BeMe Basic.

BeMe Moderate

Formtilpasset for optimal støtte

BeMe Moderate gir trygg og stabil støtte for personer med økte posturale behov.

Med en justbar, formtilpasset setepute (contoured seat) og et tilpasningsdyktig korsryggstøttesystem sikres presis posisjonering som støtter funksjon, aktivitet og selvstendighet i hverdagen.



Skann QR koden for å lære mer



Se videoen om BeMe Moderate for en gjennomgang av funksjoner og fordeler, inkludert den justbare, formtilpasset sete (contoured sete) og det innovative korsryggstøttesystemet.

Egnet for personer på GMFCS nivå 4-5, som har behov for økt stabilitet og støtte av bekken og overkropp.

Tilpasset brukere som har behov for ekstra tilbehør, som spesialtilpasset hode støtte eller sidestøtter.

Gir støtte til personer som vil ha nytte av å formtilpasset sete (contoured sete) og rygg med korsryggstøtte.

Forbedret bekkenstøtte


Formtilpassede puter er anerkjent for å gi bedre bekkenstabilitet – utfordringen er å bevare denne støtten i takt med vekst og utvikling.

Vår innovative formtilpassede pute møter denne utfordringen. Den kan justeres i takt med brukerens vekst og opprettholder optimal støtte over tid. Puten har følgende funksjoner:



Møt Ethan

Barn som Ethan bruker aktivitetsstolen sin mesteparten av dagen for å kunne delta i skole og familieliv. Den forbedrede støtten for bekken og overkropp reduserer tretthet og hjelper ham med å utvikle kontroll over overkropp og hode. Ethan elsker den knallrøde fargen!

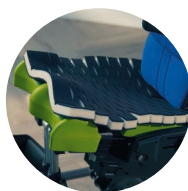

Trekkspill-skumpute og 4-veis stretchstoff muliggjør dyp nedsenking og trykkavlastning.



Justerbar hoftebredde bak som gir god side stabilitet. Abduksjonsposisjonering foran for optimal hofte helse.



En dybdejusterbar sittebensstøtte skaper en dyp sittegrep som stabilisere bekkenet.



Utviklet for å gi økt støtte

I tillegg til økt bekkenstabilitet og korsryggstøtte vil personer med begrenset trunkuskontroll ha nytte av ekstra side- og bryststøtte for å bedre funksjonen av armene.

BeMe Moderate er her utstyrt med:

- 1 En justerbar hodestøtte som kan formes for å passe ulike behov.
- 2 En polstret 4-punkts vest og hoftebelte.
- 3 Vinkeljusterbare benstøtter med sandaler.
- 4 Utsvingbare sidestøtter.
- 5 Justerbare armlener.

Korsryggstøtte

BeMe Moderate har et unikt korsryggstøttesystem som legger til rette for en oppreist og stabil sittestilling – avgjørende for respirasjon, spising, kommunikasjon og arm- og håndfunksjon.

Tradisjonelle, flate ryggstøtter følger ikke korsryggens naturlige kurve. Det kan skape et mellomrom i korsryggen og føre til at brukeren synker sammen i setet.

BeMe Moderate løser dette med et innovativt korsryggstøttesystem. Den vinkeljusterbare korsryggputen integreres sømløst med ryggputen og danner en anatomisk kurve som støtter korsryggen. Denne målrettede støtten fremmer en mer oppreist og funksjonell sittestilling.



Skann for å se animasjonen av vårt korsryggstøttesystem.



BeMe Advanced

Tilpasset støtte for komplekse behov

For personer med mer komplekse behov gir BeMe Advanced presis og målrettet støtte.

Med et multijusterbart, delt sete og en innovativ 3-delt ryggstøtte kan løsningen tilpasses postural asymmetri i over- og/eller underkropp, for å støtte og utvikle den enkeltes potensiale.



Egnet for personer på GMFCS nivå 5 som for eksempel har utviklet skoliose, asymmetrier, windswept-stilling eller betydelig benlengdeforskjell.

Gir maksimal støtte og presis posisjonering ved komplekse behov.

Et godt alternativ for personer som tradisjonelt ville hatt behov for et formstøpt sittesystem.

Se funksjonene og fordelene med BeMe Advanced, som på en smart måte bygger bro mellom modulbasert og formstøpt sittesystemer.



- 1 Justerbar hodestøtte som kan tilpasses som flat, formet eller omsluttende løsning – alternativt kan man velge fra hele Whitmyr-serien.
- 2 Dynamisk rygg som kan reguleres for å kontrollere motstanden ved ekstensjon og dempe returbevegelsen.
- 3 Justerbar skulderseksjon og utsvingbare sidestøtter kan tilpasses for optimal justering og komfort.
- 4 Et bredt utvalg av fotplatetilbehør, inkludert sandaler, fotstøvler og ankelstøtter, for å imøtekomme ulike behov.
- 5 Innovativ ryggstøtte med tre uavhengig justerbare seksjoner i høyde, dybde og vinkel, som kan tilpasses kyfose, skoliose eller hyperlordose.
- 6 Den delte seteløsningen med multijusterbar konstruksjon gir presis tilpasning ved asymmetrier.



Delt sete

BeMe Advanced er utstyrt med et delt sete som kan tilpasses de fleste asymmetrier i underekstremitetene.

Som øvrige løsninger i BeMe-serien har også dette setet en patenterte trekkspill-skumpute kombinert med 4-veis elastisk trekk, som gir opptil 12 cm innbygd vekstkapasitet.

Nøye plasserte rotasjonspunkter sikrer at setets benstøtter beveger seg synkront med brukerens lår, noe som gir presis posisjonering ved asymmetriske stillinger som windswept og ved benlengdeforskjeller.



Innovativ 3-delt rygg

For personer med ikke-korrigerbare asymmetrier i rygg og nakke er en formtilpasset ryggstøtte avgjørende for å opprettholde en åpen og stabil overkropp, og for å sikre at hodet og blikket holdes i midtlinjen. Dette er viktig for optimal posisjonering, funksjon og komfort.


I motsetning til faste, formstøpte systemer er BeMe Advanced sin innovative 3-delte ryggstøtte utviklet for å vokse og tilpasse seg over tid. Den består av tre sammenkoblede seksjoner som kan justeres uavhengig av hverandre i høyde, vinkel og dybde. Seksjonene er festet til en sentral ryggstøtte via kuleledd, noe som gjør det mulig å tilpasse systemet effektivt ved ikke-korrigerbare asymmetrier.

Overlegen dynamisk rygg

For enkelte personer med omfattende behov, som ved høy ekstensjonsspasmer eller utfordringer med sanseregulering, kan kontrollert bevegelse være en viktig del av selvreguleringen.

BeMe Advanced er derfor utstyrt med en dynamisk ryggstøtte som følger brukerens bevegelser, gir økt komfort og gjør at stolen responderer naturlig på endringer i kroppsstilling.

Funksjonen er lufttrykksstyrt, slik at motstanden ved ekstensjon og hastigheten på returbevegelsen kan justeres etter behov. Dette gir mulighet for tilpasset bevegelse og kan bidra til økt ro og bedre regulering i sittestillingen.

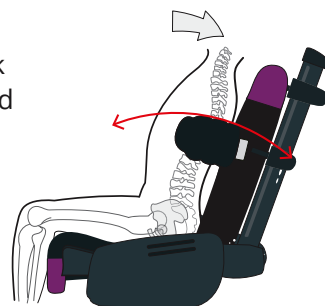

Møt Imteyaz

Imteyaz hadde behov for en løsning som kunne tilpasses ryggens form og hennes ikke-korrigerbare feilstillinger i underekstremitetene. Dette var avgjørende for at hun skulle kunne sitte komfortabelt, holde hodet i midtlinjen og delta aktivt i klasseromsaktiviteter.

– BeMe har gjort en stor forskjell for Imteyaz. Hun sitter betydelig bedre, tonusen har redusert seg, og hun er nå i stand til å samhandle med jevnaldrende.

Imteyaz sin fysioterapeut



En perfekt match

Skann for å bli kjent med BeMe-familien!



Når det gjelder understell, er BeMe en perfekt løsning i kombinasjon med et bredt utvalg av manuelle, elektriske og multijustbare understell.

BeMe fungerer optimalt i kombinasjon med Leckey-serien av understell med regulerbar høyde og tilt. Dette gir fleksibel tilgang til aktiviteter og omgivelser – hjemme, på skolen og gjennom hele dagen. Understellene er tilgjengelige i følgende varianter:

- Manuell innendørs
- Elektrisk innendørs
- Manuell for inne- og utendørs bruk
- Elektrisk for inne- og utendørs bruk



BeMe er også en ideell løsning i kombinasjon med den manuelle rullestolen Zippie Iris. Med patentert rotasjon-i-rommet-teknologi gir den jevn og kontrollert tilt av seterammen rundt brukerens tyngdepunkt. Dette sikrer kortest mulig hjulavstand uten at det går på bekostning av stabiliteten.

Q300 M-basen er et kompakt, midtmontert elektrisk understell.



Med 14" drivhjul gir den trygg, stabil og presis manøvrering – enten i trange innendørs omgivelser eller ved kjøring utenfor faste underlag.

Tilbehør

Hoftestøtter

Hoftestøtter er tilgjengelige i tre størrelser og kan justeres både i bredde og dybde for å tilpasses vekst. Når de er festet til den komplekse ryggløsningen, følger de rotasjonen i korsryggsstøtten og bidrar til å opprettholde korrekt bekkenstilling.




Benleder (mediale og laterale)

Benleder leveres som standard med BeMe Advanced. De bidrar til korrekt posisjonering av lårbenet gjennom presis lårstøtte, og er utstyrt med hurtigutløser og full utskiftbarhet mellom medial og lateral plassering.




Abduksjonskloss

Med mykt skum og et glatt trekk for komfort er abduksjonsklossen utviklet for brukere med høy adduktortonus. Den finnes i tre størrelser for å sikre optimal passform og støtte.

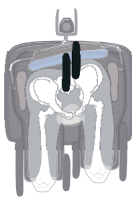


Slanke sidestøtter

Et alternativ til standard utfellbare sidestøtter på BeMe Moderate og Advanced. Den kompakte utformingen gir stabil støtte uten å begrense funksjon eller bevegelse. Tilgjengelig i tre størrelser, med justering i høyde, dybde og vinkel for presis posisjonering av overkroppen.

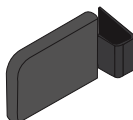

Hengslede sidestøtter

Justerbare sidestøtter som gir økt kontaktflate samtidig som de tilpasses ryggens kurvatur. Hengslede sidestøtter fungerer som et par hender som støtter overkroppen. Overarmsstøtter og 2,5 cm innsetningsbraketter er tilgjengelige for alle sidestøttealternativer.

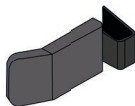

Omsluttende sidestøtter

Dette komfortable alternativet



kombinerer side- og bryststøtte, øker proprioseptiv tilbakemelding og fremmer bedre bevegelse i skulderbeltet. Tilgjengelig i to størrelser og utformet i tråd med SATCo-prinsippene for målrettet postural støtte.

4-punkts vest

Laget av myk neopren med naturlig elastisitet, som gir kontrollert bevegelse i overkropp og skuldre, samtidig som den opprettholder nødvendig postural støtte.



Dynamisk rygg

Med rotasjon i hofteladdsområdet følger den dynamiske ryggfunksjonen kroppens naturlige bevegelser ved ekstensjon. Når den dynamiske funksjonen aktiveres, sikrer den at ryggstøtte, hodestøtte og sidestøtter forblir i korrekt posisjon gjennom hele bevegelsen.



Fotstøvler

En god introduksjon til tidlig fotposisjonering. Fotstøvler er et komfortabelt alternativ som gir full støtte til ankel og fot for yngre barn. Tilgjengelig i to størrelser.



Ankelstøtter

Ankelstøtter gir fotstøtte samtidig som de tillater bevegelsesfrihet, og sikrer komfort og stabilitet. Justerbare stropper gjør det mulig å variere graden av bevegelse.



Sandaler

Tilgjengelige i tre størrelser for nøyaktig fotplassering på fotplaten. De fremmer stabilitet i underekstremitetene og hindrer at foten glir ut av posisjon.



Fotplate

Egnet for brukere som ikke trives med fast fotposisjonering. Gir bakre og lateral beskyttelse av foten.



	Størrelse 1	Størrelse 2	Størrelse 3	Størrelse 4, (DK2/Rang1)
Sete				
Setedybde (mm)*	120-270	225-350	320-430	400-540
Maksimal setebredde (uten hofteguider)(mm)	280	325	410	475
Lårbredde på delt sete (mm)		90-125	110-160	135-170
Maksimal brukervekt (kg)**	35	50	70	80
Rygg				
Ryggghøyde (mm)	300-400	350-470	400-530	475-650
Standard bredde på hofteguider (mm)	145-215	175-260	245-350	290-405
Slim bredde på hofteguider (mm)	170-240	200-285	270-375	315-430
Bredde på sidestøtter (mm)	130-230	200-300	225-350	350-450
Innfelt bredde på sidestøtter (mm)	80-180	150-250	175-300	300-400
Ryggvinkel (grader)	+10 til -25	+10 til -25	+10 til -25	+10 til -25
Maksimal brukervekt (kg)**	35	50	70	80
Fotstøtte				
Underbenslengde (mm)	120-270***	225-350	320-440	400-540
Maksimal dorsalfleksjon (grader)	15	15	15	15
Maksimal plantarfleksjon (grader)	15	15	15	15
Understell				
Understellbredde – MHT innendørs (manuell og elektrisk) mm	610	610	610	610
Understellbredde – MHT innendørs/utendørs (manuell og elektrisk) mm	640	640	640	640
Understelllengde – MHT innendørs (manuell og elektrisk) mm	825	825	825	825
Understelllengde – MHT innendørs/utendørs (manuell og elektrisk) mm	910	910	910	910
Tiltområde – MHT innendørs (manuell og elektrisk)	-15 til 25	-15 til 25	-15 til 25	-15 til 25
Tiltområde – MHT innendørs/utendørs (manuell og elektrisk)	-15 til 25	-15 til 25	-15 til 25	-15 til 25
Gulv til sete (minimum) – MHT innendørs (manuell og elektrisk) mm	330	430	430	480
Gulv til sete (maksimum) – MHT innendørs (manuell og elektrisk) mm	870	900	900	950
Gulv til sete (minimum) – MHT innendørs/utendørs (manuell og elektrisk) mm	330	430	430	480
Gulv til sete (maksimum) – MHT innendørs/utendørs (manuell og elektrisk) mm	910	940	940	990
Maksimal vekt (kg)****	80	80	80	80

Standard konfigurasjon inkluderer: delt sete, moderat rygg, dynamisk rygg, armlener, fire punkts hoftebelte, utsvingbare sidestøtter, hoftestøtter, hodestøtte, polstret benleder, fotstøtter og understell.

*Alternativet 120 til 170 krever avstandsstykke. 170 eller lavere er ikke kompatibelt med kontursetealternativer.

** Systemets maksimale brukervekt er den laveste grensen for sete, understell og ryggstøtte.

*** Med korte benstammer

**** Maksimal vektkapasitet gjelder kun understellet